

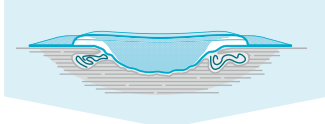



Leitfaden zum geeigneten Einsatz von Wundfüllern

Oberflächlich	0 – 2 cm tief ^{1,2,3}	> 2 cm tief	Unterminierung/ Tunnel
			
<p>Biatain® Silicone</p>	<p>Biatain® Silicone</p>	<p>Wundfüller + Biatain® Silicone</p>	<p>Wundfüller + Biatain® Silicone</p>
<p>Der Biatain® Schaum absorbiert vertikal und schützt somit den Wundrand und die -umgebung.</p> 	<p>Der Biatain® Schaum stellt einen direkten Kontakt zum Wundgrund her und reduziert die Ansammlung von Wundexsudat.</p> 	<p>Drapieren Sie den Wundfüller locker, aber füllen Sie die Wunde nicht bis auf Hautniveau. Lassen Sie dem darüber applizierten Biatain® Schaum genug Platz, um sich in die Wunde zu wölben. Das ermöglicht eine vertikale Absorption und den Schutz von Wundrand und -umgebung.</p> 	<p>Füllen Sie den unterminierten Wundrand und decken Sie die Wunde mit einem Biatain® Schaumverband als Sekundärverband ab.</p> 
			

Diese Informationen sind als allgemeine Hinweise zu verstehen.
Bitte berücksichtigen Sie auch die für Ihr Fachgebiet geltenden Leitlinien.

1. Braunwart H et al, Conformability of a foam dressing – clinical experience based on 104 cases. Wound UK 2017. 2. Braunwart H et al, Conformability of a foam dressing – clinical experience based on 104 cases. EWMA 2018. 3. Data on file VV0201548 (Biatain® Silicone 12.5 x 12.5 cm).

Biatain® Silicone, mit Silikonhafrand



PZN	Handel Artikel-Nr.	Schaumkissen/cm Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
03875348	334343	4,5 × 4,5 7,5 × 7,5	10	3343433
03879292	334353	6,5 × 6,5 10 × 10	10	3343533
11486000	33400	5,5 × 15,5 10 × 20	5	3340003
11486017	33401	5,5 × 25,5 10 × 30	5	3340103
11486075	33408 Multishape	7,5 × 12,1 14 × 19,5	5	3340803
03879702	334363	8,5 × 8,5 12,5 × 12,5	10	3343633
03879731	334373	10,5 × 10,5 15 × 15	5	3343733
03880585	334383	13 × 13 17,5 × 17,5	5	3343833
11486023	33404 Sakrum	10,9 × 14 15 × 19	5	3340403
11486052	33405 Sakrum	17 × 17,2 25 × 25	5	3340503
11486069	33406 Ferse	14 × 13,2 18 × 18	5	3340603

Biatain® Silicone Non-Border, mit Silikonhaftung



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
16942307	39020	5 × 7,5	10	3902013
16942313	39021	7,5 × 7,5	10	3902113
16942336	39022	10 × 10	10	3902213
16942342	39023	12,5 × 12,5	10	3902313
16942359	39024	10 × 20	5	3902423
16942365	39025	15 × 15	5	3902523
16942371	39026	20 × 20	5	3902623

Biatain® Silicone Lite, mit Silikonhafrand



PZN	Handel Artikel-Nr.	Schaumkissen/cm Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
11485986	33452	2,2 × 2,2 5 × 5	5	3345203
11485992	33453	2,2 × 9,7 5 × 12,5	5	3345303
03880639	334443	4,5 × 4,5 7,5 × 7,5	10	3344433
03880697	334453	6,5 × 6,5 10 × 10	10	3344533
03880705	334463	8,5 × 8,5 12,5 × 12,5	10	3344633



Für weitere Produkte und Haftarten aus dem **Biatain® Schaumverband-Portfolio** scannen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone ein.

Biatain® Silicone Ag, mit Silikonhafrand



PZN	Handel Artikel-Nr.	Schaumkissen/cm Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
03880711	396363	4,5 × 4,5 7,5 × 7,5	5	3963633
03880728	396373	6,5 × 6,5 10 × 10	5	3963733
13704518	39644	5,5 × 15,5 10 × 20	5	3964403
13704524	39645	5,5 × 25,5 10 × 30	5	3964503
03880734	396383	8,5 × 8,5 12,5 × 12,5	5	3963833
11033497	396393	10,5 × 10,5 15 × 15	5	396393
03880757	396403	13 × 13 17,5 × 17,5	5	396403
13704607	39650 Sakrum	10,9 × 14 15 × 19	5	3965003
13704547	39651 Sakrum	17 × 17,2 25 × 25	5	3965103
13704530	39652 Ferse	14 × 13,2 18 × 18	5	3965203

Biatain® Fiber



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
15628543	33502	5 × 6	10	33502
15628566	33504	10 × 12	10	33504
15628595	33506	15 × 15	5	33506
15628603	33507	19 × 25	5	33507
15628632	33508 Tamponade	2,5 × 46	10	33508

Biatain® Alginate



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
01406388	37053	5 × 5	10	370533
01406365	3705	5 × 5	30	370523
01406394	3710	10 × 10	10	371023
01406419	3715	15 × 15	10	371523
01406425	3740 Tamponade	3 × 44	5	374033

Biatain® Alginate Ag



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
01406448	37551	5 × 5	10	375513
01406431	3755	5 × 5	30	375503
01406833	3760	10 × 10	10	376003
01406856	3765	15 × 15	10	376503
01406885	3780 Tamponade	3 × 44	10	378003

- leicht - mittel
- mittel - stark
- wasserfest
- Fixierung nötig
- zuschneidbar
- kolonisiert
- Sekundärverband nötig